

INFLUENZA A+B

TEST RAPIDO



SEMPLICE, RAPIDO E PRECISO



TAMPONE
NASOFARINGEO



TAMPONE
OROFARINGEO



Il Test Rapido in Cassetta (Tampone) Influenza A+B è un test immunologico cromatografico rapido per la rilevazione qualitativa degli antigeni nucleoproteici dell'influenza di tipo A e B nei tamponi nasali o faringei.

Questo kit è concepito per essere utilizzato come ausilio nella diagnosi dei virus dell'influenza A e B in tamponi nasali, tamponi faringei o campioni di aspirato nasale.

RACCOLTA DEL CAMPIONE

I campioni ottenuti precocemente durante l'insorgenza dei sintomi conterranno i titoli virali più elevati; i campioni ottenuti dopo cinque giorni di sintomi hanno maggiori probabilità di produrre risultati negativi. Una raccolta inadeguata dei campioni, una manipolazione e/o un trasporto improprio dei campioni possono produrre un risultato falsamente negativo; pertanto, l'addestramento alla raccolta dei campioni è altamente raccomandato a causa dell'importanza della qualità dei campioni per la generazione di risultati di test accurati.



Campione di tampone nasofaringeo


Inserire un minitampone con un'asta flessibile (filo o plastica) attraverso la narice parallela al palato (non verso l'alto) fino a quando si incontra resistenza o la distanza è equivalente a quella dall'orecchio alla narice del paziente, indicando il contatto con il rinofaringe. Il tampone deve raggiungere una profondità pari alla distanza dalle narici all'apertura esterna dell'orecchio. Strofinare delicatamente e ruotare il tampone. Lasciare il tampone in posizione per diversi secondi per assorbire le secrezioni. Rimuovere lentamente il tampone ruotandolo. I campioni possono essere raccolti da entrambi i lati utilizzando lo stesso tampone, ma non è necessario laddove la punta è satura di fluido dopo la prima raccolta. Se un setto deviato o un'ostruzione crea difficoltà nell'ottenere il campione da una narice, utilizzare lo stesso tampone per ottenere il campione dall'altra narice.



Campione di tampone orofaringeo

Inserire il tampone nelle aree posteriori della faringe e delle tonsille. Strofinare il tampone su entrambi i pilastri tonsillari e sull'orofaringe posteriore evitando di toccare la lingua, i denti e le gengive.

PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

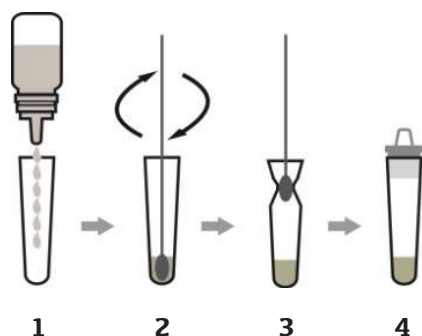

1. Aggiungere 0,5 mL (16 gocce) del reagente per estrazione del campione nella provetta e posizionarla sulla stazione di lavoro.


2. Inserire il tampone nella provetta di estrazione che contiene 0,5 ml (16 gocce) di tampone di estrazione. Ruotare il tampone all'interno della provetta con un movimento circolare per ruotare il lato della provetta di estrazione in modo che la soluzione venga estratta e riassorbita dal tampone.

Lasciare il tampone nella provetta del reagente per un minuto.

3. Pizzicare il tubo di estrazione con le dita e rimuovere la soluzione dal tampone il più lontano possibile. La soluzione estratta verrà utilizzata come campione di prova.

4. Inserire saldamente un beccuccio con filtro nel tubo di estrazione del campione.

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

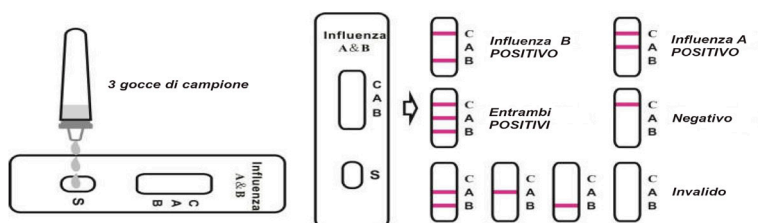

(L'IMMAGINE È SOLO DI RIFERIMENTO, FARE RIFERIMENTO ALL'OGGETTO MATERIALE)

Positivo: La linea di controllo e almeno una linea di test compaiono sulla membrana. La comparsa di una linea di test indica il tipo di influenza A positivo. L'aspetto della linea di test B indica che l'influenza di tipo B è positiva. E se compaiono entrambe le linee A e B, indica che la presenza sia dell'influenza di tipo A che B è positiva.

Negativo: Una linea colorata appare nella zona di controllo (C). Nessuna linea colorata apparente appare nella zona della linea del test.

Non valido: La linea di controllo non viene visualizzata. Un volume di campione insufficiente o tecniche procedurali errate sono le ragioni più probabili dell'insuccesso. Rivedere la procedura e ripetere il test utilizzando una nuova cassetta per test. Se il problema persiste, interrompere immediatamente l'utilizzo del lotto e contattare il distributore locale.

Attendere che compaiano le linee colorate. Interpretare i risultati del test in 15 minuti.
Non leggere i risultati dopo 20 minuti.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
INF-AB	Test Rapido - Influenza A+B	BOX da 20 / 25

More than surgery

ITALIA

Stabilimento di Produzione

Zona Industriale
67062 Magliano dei Marsi (AQ), Italy
Tel. +39 0863 517956/515000
Fax +39 0863 570084/515209

Ufficio Legale

Via G. Gregoraci, n.12
00173 Roma
Tel. +39 06 72677348
Fax +39 06 72675380

FRANCE

86-114 Avenue Louis Roche
Batiment D Hall-3 92230
Gennevilliers
Tel. +33 147985294
Fax +33 147985892

ESPAÑA

Poligono Landaben
Calle C, nave 1y2 - 31012
Pamplona (Navarra)
Tel. +34 948122274
Fax. +34 948120842

GERMANY

Prager Strasse 34
04317 Leipzig

UK

Unit 12a Barncliffe Mills
Shelley HD8 8LU Huddersfield
Tel. +44 1484602222



USA

55 NE 5th Avenue, Suite 501
33432 - 4093 Boca Raton FL
United States

RUSSIAN FEDERATION

c/o Studio Marzona
Rozhdestvenskiy B-r 10 Bld. 7
107031 Moscow
Tel/Fax +7 962 9862804

BRASIL

Rua Professor Alfredo Gomes, 14
CEP 22551-080
Botafogo Rio De Janeiro (RJ)
Tel.: 0055 21 22661943
Fax: 0055 21 22663539

ALGERIE

Zone D'Activité Dar El Beida
Lot n° 66, Bt 12
Alger

TUNISIE

Rue 7316 Villa n°5 - El Menzah 9B
1013 Tunis, Tunisie
Tel.: 00216 71875740
Fax: 00216 71880541

www.assuteurope.com
info@assuteurope.com

