


VISIERA FACCIALE BLAYCO

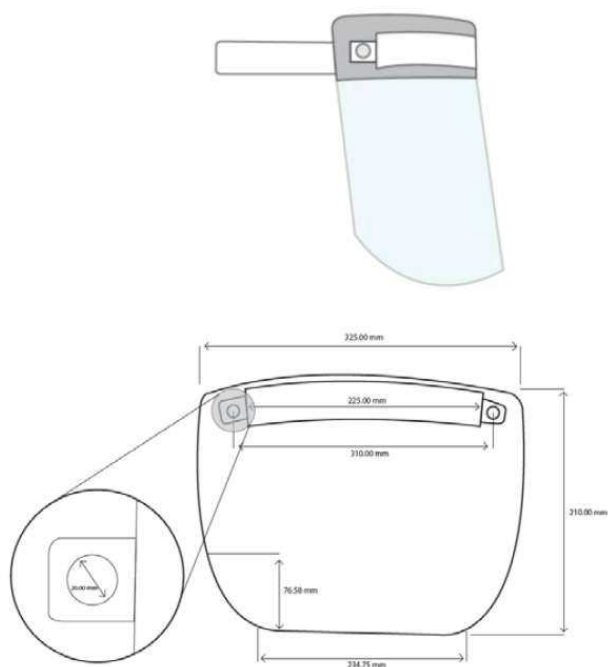

Materiali

- Scudo trasparente: PET
- Fascia: 50% poliestere e 50% elasthan
- Schiuma protettiva: poliuretano
- Rivetto: resina acetica
- Confezione individuale: custodia con cerniera in PE, richiudibile
- Imballaggio secondario: scatola di cartone

Principali proprietà dimensionali

- Larghezza scudo: 325 mm
- Lunghezza totale scudo: 230 mm
- Lunghezza visiera: 210 mm
- Spessore visiera: 400 µm.
- Profondità dello scudo: 40 mm
- Lunghezza della schiuma protettiva: 225 mm

Caratteristiche del prodotto

- Offre protezione per le mucose facciali (occhi, naso e bocca).
- Prevenzione del contagio da malattie prodotte da microrganismi che si diffondono tramite goccioline grazie al blocco di schizzi di fluidi corporei e/o aerosol.
- Fascia per l'assoggettamento dello scudo.
- Prodotta con materiali leggeri. Comoda per l'uso.
- La protezione è compatibile con l'uso di occhiali aggiuntivi e/o maschere complementari.

Istruzioni per l'uso

Prima che il personale sanitario sia esposto a possibili contaminazioni, dovrebbe:

- Posizionare la visiera facciale Blayco® sulla testa, in modo tale da posizionare la fascia elastica nella parte posteriore e lo schermo nella parte anteriore, coprendo il viso.
- Regolare la posizione della visiera Blayco® fino a quando non si adatta in modo conveniente.

<i>Prodotto</i>	<i>Codice Prodotto</i>
BLAYCO Visiera Facciale	PF-01