




MASCHERINA CHIRURGICA PEDIATRICA

CON ELASTICI AURICOLARI

TIPO IIR

Mascherina chirurgica pediatrica monouso di tipo IIR, non sterile, efficace nel ridurre le emissioni di agenti infettivi da naso e bocca di un soggetto asintomatico o un paziente con sintomi.



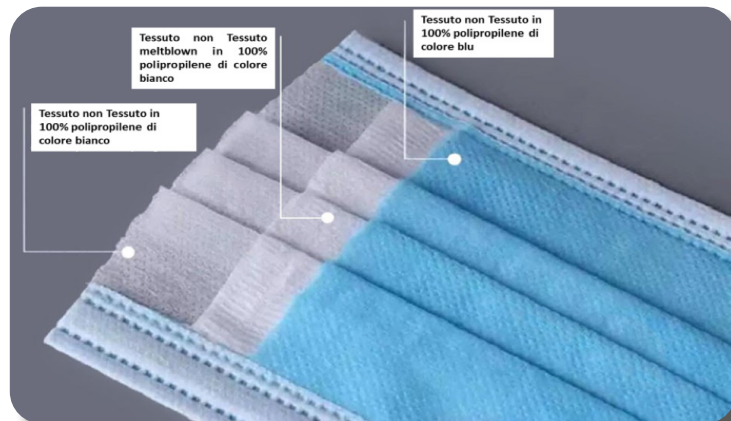

La mascherina chirurgica Functional mask-02 REF: **KIDS7788** é costituita dalla sovrapposizione di 3 strati di tessuto-nontessuto (TNT) con diverse funzionalità e caratteristiche, come riportato qui di seguito:

Strato esterno: TNT Spunbond (S) idrofobico, con buona resistenza meccanica.

Strato Filtrante: TNT Meltblown (M), costituito da microfibre più piccole (1-3 m), con azione filtrante.

Strato interno: TNT Spunbond (S) idrofobico e biocompatibile a contatto con la pelle.

Grazie ad una clip nasale e a elastici auricolari fissati sui 4 angoli della stessa, viene garantita la massima aderenza ai contorni di naso e bocca.

Dimensioni: mm 95 x 140 ± mm3 e con i seguenti attributi di prestazione:

- Efficacia di filtrazione batterica (BFE) ≥98%
- Bioburden ufc/g ≤30
- Respirabilità (Differential pressure) Pa/cm² <49.0
- Resistenza ai fluidi (kPa) ≥16

<i>CODICE PRODOTTO</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>DIMENSIONI</i>	<i>BOX</i>
REF KIDS 7788	Functional Mask-02	mm 96 x 140 ± 3mm	10 pz.