


SYLARUM™




Anoscopio ad altezze regolabili

INDICAZIONI PRINCIPALI


GESTIONE MINIMAMENTE INVASIVA DELLE MALATTIE ANORETTALI

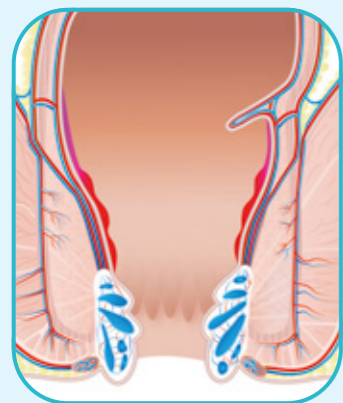


Emorroidi prolassate

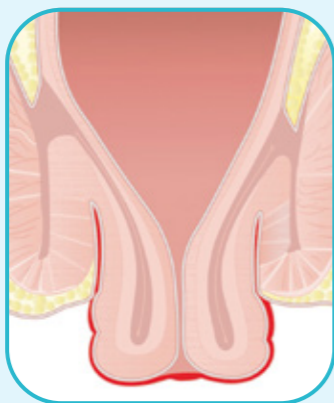

Prolasso rettale

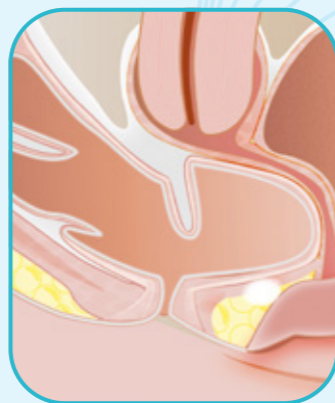

Rettocele anteriore

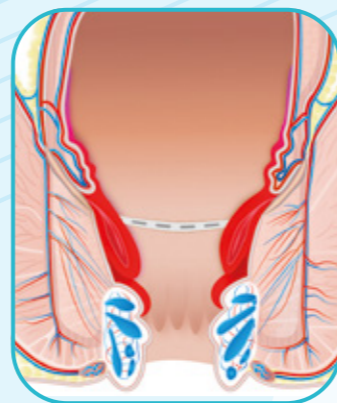

Recidiva dopo prolassectomia meccanica

POSIZIONAMENTO DELL'APERTURA

Opzioni verticali

- Si adegua alla diversa anatomia del canale anale dovuta alla corporatura del paziente
- Consente durante l'intervento un allineamento graduale dell'apertura, permettendo una visualizzazione delle strutture anatomiche in modo selettivo

BASSA



MEDIA



ALTA



CARATTERISTICHE E VANTAGGI PRINCIPALI


UNITÀ OPERATIVA (UO)

Punta chiusa a doppia curva anatomica

Apertura a T rovesciata

UNITÀ DI CONTROLLO (UC)

Regolazione dell'altezza

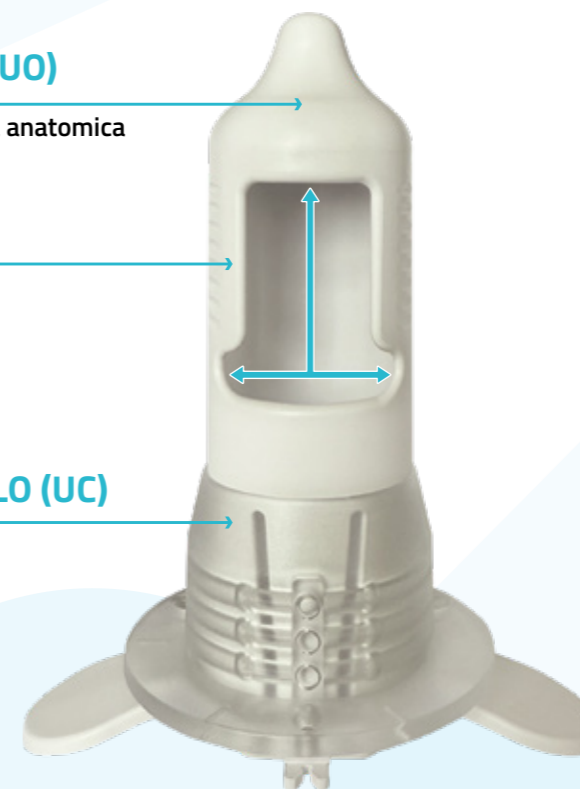

→ Fornisce una visualizzazione ottimale dell'area da trattare impedendo la sporgenza di tessuto o feci nel canale interno del dispositivo


→ La presenza di aree dedicate alla legatura arteriosa-selettiva (area orizzontale) e alla mucopessia (area verticale) permette maggiore libertà di esecuzione di passaggi profondi o superficiali

→ La natura trasparente della UC permette di localizzare facilmente la linea dentata e di utilizzarla come punto di riferimento

→ Una serie di misure di sicurezza impediscono movimenti accidentali delle UO e UC

→ Permette di posizionare in maniera selettiva l'apertura a T rovesciata lungo l'area verticale su 3 livelli e lungo tutta la circonferenza

Opzioni per quadrante

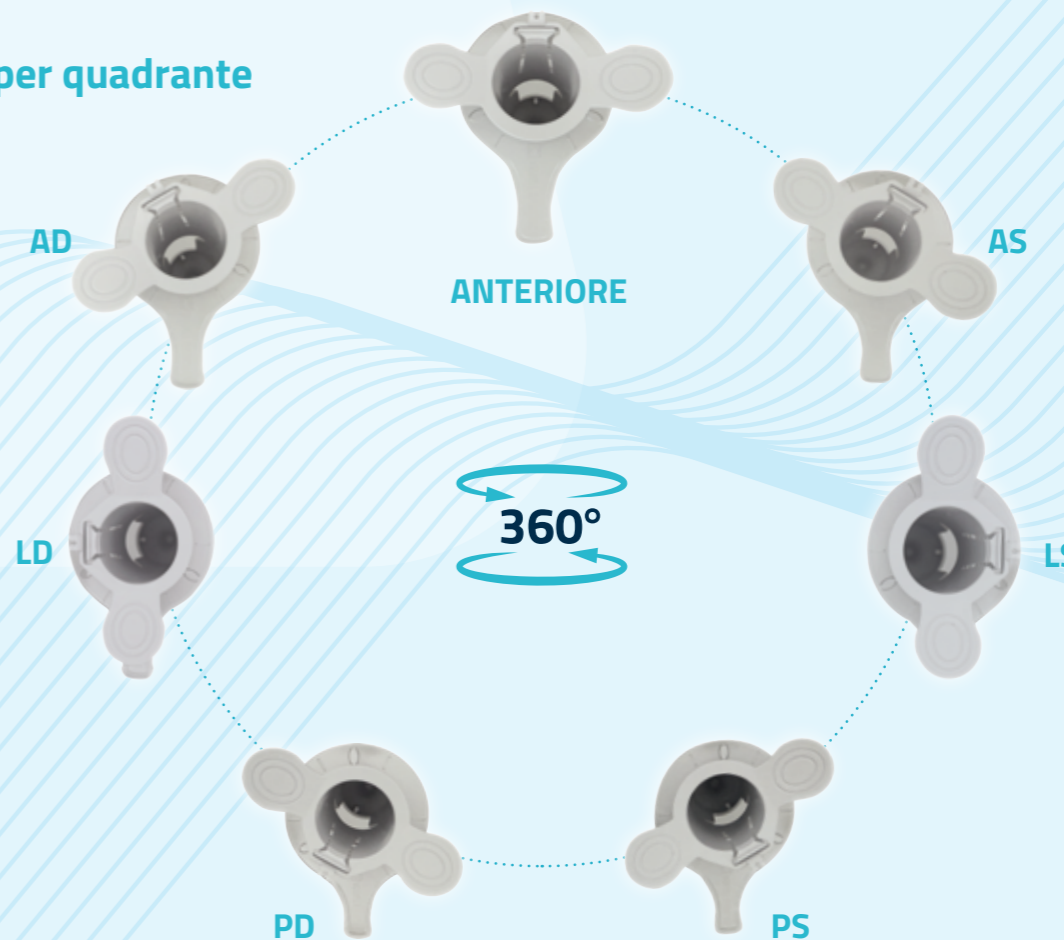

CODICI

CODICE	ANL1
DESCRIZIONE	Anoscopio Monouso

KIT PROCEDURALI

CODICE	MIM 01
NOME DEL KIT	Minimally Invasive Mucopexy
COMPOSIZIONE DEL KIT	Cod. FS430 7pz (Assufil – 5/8 C. Cilindrico rinforzato 27 mm, 70cm, USP 0) Cod. KR561 1pz (Assusilk - 3/8 C. Triangolare 30mm, 75cm, USP 1) Cod. TS-80-30-00 1pz (Tampone emostatico per colonproctologia 80 X Ø 30 mm) Cod. OT010-020 1pz (Oxitamp - Garza emostatica assorbibile 10x20cm)

CODICE	MIMX 02
NOME DEL KIT	Minimally Invasive Mucopexy Advanced
COMPOSIZIONE DEL KIT	Cod. FR434HHFAG 6pz (Filbloc 90 - 5/8 C. Cilindrico, Rinforzato 27mm, 40cm, USP 0) Cod. ZU429AP 2pz (Assuplus - 5/8 C. Cilindrico rinforzato 27mm, 70cm, USP 2/0) Cod. FS430 1pz (Assufil – 5/8 C. Cilindrico rinforzato 27 mm, 70cm, USP 0) Cod. KR561 1pz (Assusilk - 3/8 C. Triangolare 30mm, 75cm, USP 1) Cod. TS-80-30-00 1pz (Tampone emostatico per colonproctologia 80 X Ø 30 mm) Cod. OT010-020 1pz (Oxitamp - Garza emostatica assorbibile 10x20cm)



CE 0373 - UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 13485:2016 | UNI EN ISO 14001:2015



www.assuteurope.com

©2025 Assut Europe S.p.A. All rights reserved



Assut Europe S.p.A.

Azienda italiana, fondata nel 1991, leader nella produzione di suture chirurgiche e dispositivi medici per molte specialità chirurgiche (generale, vascolare, cardio, toracica, ortopedica, ecc.). Presente in oltre 11 Paesi nel mondo, si distingue per la qualità dei suoi prodotti e per una vision basata sull'eccellenza del "Made in Italy", con costante investimento in innovazione e ricerca.

E-MAIL info@assuteurope.com

TELEFONO +39 0863 517956

INDIRIZZO Via G. Gregoraci, 12, 00173 - ROMA